

TE-5100Y-C型动态心电记录仪

十三、TE-5100Y-C型动态心电记录仪

1、产品介绍

TE-5100Y-C动态心电记录仪，是一款时尚小巧的贴式心电采集设备,可以采集人体单导心电数据，通过蓝牙无线传输到APP端进行心电波形和心率显示、测量，该产品配戴简单、使用方便，不影响用户的正常生活和工作，适用于人体单导心电数据的测量、采集、观察和存储，供临床诊断。本产品由主机、移动端App和附件组成，附件包含一次性使用心电电极、充电盒。

产品贴于胸前皮肤后自动开机并采集生理数据，采用无导联线设计，轻薄小巧，低功耗设计，续航24小时以上，待机一年以上，IPX7防水设计，佩戴舒适，不影响日常生活。

App具备多种使用模式，用户可根据使用情况进行切换。可以采集片段心电，经智能诊断分析，快速给出心电分析结果；可以全天候实时测量，渗透用户生活中的每时每刻；可在睡眠中监测心脏健康的同时监测用户的睡眠质量，提出合理化建议；可在跑步中监测心律变化的同时，描绘配速曲线与心率曲线，帮助运动爱好者提高训练效果。



2、产品功能

快速心电测量

支持心电、心率监测

手按电极自动开机

具备计步功能

支持BLE5.0蓝牙无线传输

IPX7防水设计

支持远程升级

3、产品规格

3.1单导心电，250采样率

3.2支持导联脱落检测

3.3动态输入范围：对于叠加了 $\pm 300\text{ mV}$ 直流偏置电压，以 125 mV/s 的速率变化的，幅度为 10 mV （峰—谷值）（当设置为 5 mm/mV ）的差模电压，数字记录仪应具备响应和显示的能力。时变输出信号的幅度等效到输入的变化不应超过 10% 或者 $50\text{ }\mu\text{V}$ ，取大值

3.4输入阻抗：高于 $10\text{ M}\Omega$

3.5共模抑制比：对于网电源频率下的正弦信号，共模抑制至少为 60 dB ，对于2倍网电源频率的信号时，则至少 45 dB

3.6增益精确度：采用固定增益 10 mm/mV ，输出信号等效到输入的测试信号，最大振幅误差为 $\pm 10\%$

3.7增益稳定性：设备通电 1 min 后，增益变化在 24 h 不能超过 3% （在稳定的环境条件下）

3.8系统噪声：不超过 $50\text{ }\mu\text{V p-p}$

3.9频率响应： $0.67\text{ Hz}\sim 40\text{ Hz}$ ($+1.2\text{ dB}\sim -3.0\text{ dB}$ ，参考频率为 5 Hz)

3.10心率监测范围： $30\text{ bpm}\sim 200\text{ bpm}$ ，允差 $\pm 2\text{ bpm}$ 或 $\pm 5\%$ ，取最大值

3.11锂离子电池， $\text{DC}3.6\text{ V}\sim 4.2\text{ V}$ ，标称电压 3.7 V

3.12工作时间：连续工作时间不低于 24 h

3.13产品尺寸： $84.5\text{ mm}\times 30\text{ mm}\times 6\text{ mm}$

3.14结构组成：主机、一次性使用心电电极、Type-C线、充电盒

3.15防护等级：IPX7

4、产品优势

4.1多维度传感器采集人体信号，结合公司自主研发算法；可以实现心电监测外的其他人体生理参数的监测。

4.2轻薄贴式设计：无导联线设计，产品贴敷于人体进行参数采集，轻薄小巧方便。

4.3低功耗设计，续航24小时以上，待机一年以上。

4.4防护等级：IPX7，可以在洗澡淋浴下佩戴使用。

5、应用场景

5.1应用对象：心律失常、肥胖、吸烟、血脂异常、高血压、糖尿病、运动、术后康复、长期劳累、精神压力大的人群等。

5.2应用场景：个人或家庭、社区医疗服务中心、养老机构、干休所、健身房、各级医院等。

5.3产品的应用对象及适用人群

5.3.2主要适用症状：包括胸痛或胸部不适、呼吸困难、心悸、水肿、咳嗽、咯血和乏力等。

6、快速操作指南

 TE-5100Y-C果实快速操作指南 V2 200821.pdf

A

TE-5100Y-C
动态心电图记录仪
快速操作指南

1. 产品介绍

本产品为便携式动态心电图记录仪，采用先进的微电子技术，具有体积小、重量轻、操作简单、记录时间长等特点。本产品适用于临床、科研、体检等多种场合。

2. 注册信息

注册证号：浙械注准20200101001

注册人：浙江好络维医疗技术有限公司

地址：浙江省杭州市余杭区文一西路939号11楼1101室

电话：0571-88888888

网址：www.hellove.com

3. 使用方法

一、下载好络维App

1. 打开手机应用商店，搜索“好络维”并下载安装。

2. 打开App，按照提示进行注册和登录。

二、佩戴设备

1. 将设备从包装中取出，检查设备是否完好。

2. 将设备佩戴在胸前，调整松紧度，确保设备与皮肤紧密贴合。

三、心电图测量

1. 在医生指导下进行心电图测量。

2. 测量过程中，保持平静，避免剧烈运动和情绪波动。

3. 测量结束后，将设备取下，妥善保管。

4. 注意事项

1. 使用前请仔细阅读说明书，了解设备的使用方法和注意事项。

2. 设备为非一次性使用产品，请勿重复使用。

3. 设备在使用过程中，请勿接触高温、高压、强磁场等环境。

4. 设备在使用过程中，请勿拆卸或改装。

5. 设备在使用过程中，请勿将设备浸入水中。

6. 设备在使用过程中，请勿将设备与其他物品混放。

7. 设备在使用过程中，请勿将设备靠近火源。

8. 设备在使用过程中，请勿将设备靠近强电磁场。

9. 设备在使用过程中，请勿将设备靠近金属物体。

10. 设备在使用过程中，请勿将设备靠近液体。

A

B

4. 一次性电极使用

1. 使用前请检查电极是否完好，如有破损请勿使用。

2. 将电极贴在胸前，调整松紧度，确保电极与皮肤紧密贴合。

3. 测量过程中，保持平静，避免剧烈运动和情绪波动。

4. 测量结束后，将电极取下，妥善保管。

5. 充电说明

1. 设备采用可充电锂电池，充电时请将设备放入充电座。

2. 充电时请勿触摸设备，以免触电。

3. 充电完成后，将设备取出，即可使用。

6. 维护保养

1. 设备为非一次性使用产品，请勿重复使用。

2. 设备在使用过程中，请勿接触高温、高压、强磁场等环境。

3. 设备在使用过程中，请勿拆卸或改装。

4. 设备在使用过程中，请勿将设备浸入水中。

5. 设备在使用过程中，请勿将设备与其他物品混放。

6. 设备在使用过程中，请勿将设备靠近火源。

7. 设备在使用过程中，请勿将设备靠近强电磁场。

8. 设备在使用过程中，请勿将设备靠近金属物体。


9. 设备在使用过程中，请勿将设备靠近液体。

B

工艺要求：
纸张大小:133X350mm(±1mm)
纸张材质:157g双面白色铜版纸
印刷颜色:正反面四色印刷
5折页,红线印时去掉
尺寸公差:V级
应符合GB/T 26572的有害物质限量要求

C

折页展示:

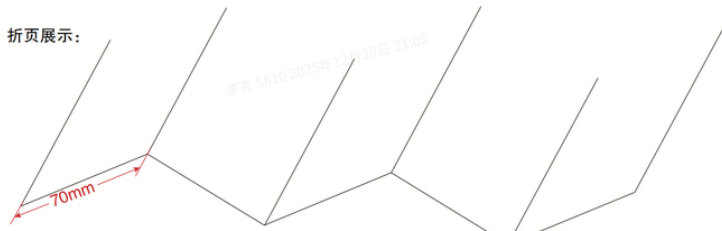

C

D

角度尺寸		线性尺寸		
		F	C	V
0°~6°	±0.05°	0~10	±0.05	±0.10
>6°~20°	±0.10°	>10~100	±0.10	±0.20
>20°~50°	±0.20°	>100~200	±0.15	±0.30
>50°~120°	±0.50°	>200~400	±0.20	±0.50
>120°~360°	±1.00°	>400	±0.30	±1.20

V1.2	修改LOGO	2	郑丹	2023/01/10
V1.1	修改“佩戴设备”及“心电图测量”的文案及示意图	2	郑丹	2021/11/16
V1.0	初版发行	0	郑丹	2020/12/03
版本	修改记录摘要	处数	变更人	日期
浙江好络维医疗技术有限公司				
制图	日期	默认单位	材料	物料名称
设计		mm	材料编码	快速操作指南/TE-5100Y-C
审核		视角	项目代号	157g双面白色铜版纸
批准			项目阶段	3020Y0H2GB
			规格: A4	TE-5100Y-C
			比例: 1:1	MP
			页码: 1/1	

D

TE-5100Y-C快速操作指南_V1.2_20230110.pdf