

TE-5200Y-C 心电记录仪

十五、TE-5200Y-C 心电记录仪

1、产品介绍

TE-5200Y-C心电记录仪是一款单导心电采集设备，产品卡片式，作为智能手机的配件，双手手指分别轻按设备的两个电极接触面，即可开机并采集心电，心电数据通过蓝牙5.0传输至APP，APP界面实时显示心电波形及心率数值。

产品轻薄卡片式，配合手机使用，功耗低、使用方便、操作简单，适用于心律失常的中老年人、运动人群、术后康复患者、加班人群、亚健康人群使用。



2、产品功能

- 2.1快速片段心电数据采集；
- 2.2快速出具心电自动分析报告；
- 2.3手按电极自动开机；
- 2.4纽扣电池供电，电池可更换；
- 2.5低功耗设计，使用半年以上；
- 2.6支持蓝牙BLE5.0无线传输；
- 2.7IPX8防水设计；
- 2.8支持远程升级。

3、产品规格

- 3.1单导联，两电极，250采样率
- 3.2支持导联脱落检测
- 3.3输入阻抗：高于10MΩ

- 3.4共模抑制比：对于网电源频率下的正弦信号，共模抑制至少为80 dB，对于2 倍网电源频率的信号时，则至少45dB
- 3.5增益精确度：采用固定增益10 mm/mV，输出信号等效到输入的测试信号，最大振幅误差为±10%
- 3.6增益稳定性：设备通电1min后，增益变化在24h不能超过3%（在稳定的环境条件下）
- 3.7系统噪声：当所有输入端通过一个51kΩ电阻和47nF电容的阻容并联网络串接各患者电极时，等效到输入的内部噪声在任意10s内都不能超过50μV峰谷值
- 3.8频率响应：0.67 Hz~ 40 Hz (+1.2dB~-3.0dB，参考频率为5Hz)
- 3.9过冲：方波过冲不超过10%
- 3.10滞后：偏离基线1.5mV后，滞后应不超过50μV
- 3.11心率监测范围：30bpm~200bpm，允差±2bpm或±5%，取最大值
- 3.12蓝牙传输距离：在空旷距离5米内
- 3.13可更换式扣式锂锰电池CR2016 3V 90mAh一次性电池，内置
- 3.14工作时间：一块满电的电池，在环境温度25℃条件下，进行心电信号采集、传输的情况下，连续工作时间不低于24h
- 3.15产品尺寸：80*32*3.5(mm)
- 3.16结构组成：主机、移动端App
- 3.17防护等级：IPX8

4、产品优势

- 4.1产品卡片式设计，配合智能手机使用，轻薄便携；
- 4.2手指轻按电极自动开机，使用方便；
- 4.3续航：每天测量10次，每次一分钟，使用时间半年以上；
- 4.4待机：3年左右，导联脱落30S，自动关机节省电量；
- 4.5IPX8防水设计；
- 4.6一次性扣式锂锰电池，低电提醒后可更换继续使用；
- 4.7搭载心知了APP、健康管理平台，可以快速出具片段心电报告，进行健康管理；

5、应用场景

- 5.1应用对象：心律失常的中老年人、运动人群、术后康复人群、加班人群、亚健康人群。
- 5.2应用场景：个人或家庭、社区医疗服务中心、养老机构、干休所、健身房、各级医院等。

6、快速操作指南



TE-5200Y-C快速操作指南 (HarmonyOS) ...

16.68MB



1

2

3

4


5

6

A



折页展示:

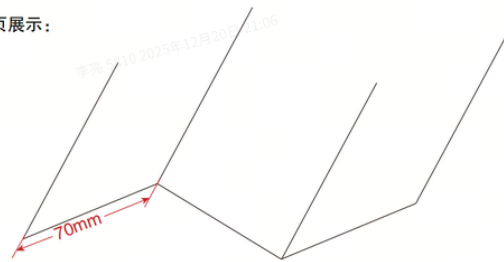

工艺要求:
纸张大小: 133X210mm (± 1mm)
纸张材质: 108g双面白色铜版纸
印刷颜色: 正反面四色印刷
应符合GB/T 26572的有害物质限量要求

角度尺寸		线性尺寸			
		F	C	V	
0°~6°	±0.05	0~10	±0.05	±0.10	±0.30
>6°~20°	±0.10	>10~100	±0.10	±0.20	±0.50
>20°~50°	±0.20	>100~200	±0.15	±0.30	±0.80
>50°~120°	±0.50	>200~400	±0.20	±0.50	±1.20
>120°~360°	±1.00	>400	±0.30	±0.80	±2.20

V1.0	初版发行	0	郑丹	2022/12/19
版本	修改记录摘要	处数	变更人	日期
浙江好络维医疗技术有限公司		物料名称	快速操作指南/TE-5200Y-C	
制图	签名	日期	默认单位	材料
设计			mm	物料编码
审核			视角	项目代号
批准				项目阶段
				MP
			规格: A4	比例: 1:1 页码: 1/1



TE-5200Y-C快速操作指南_V1.0_20221219.pdf