


TE-5000Y-A型心电图机

十九、TE-5000Y-A型心电图机

1、产品介绍

此产品是一款专业医疗级的异步十八导静态心电图机，通过身份识别用户，采集高达16K采样率的静态心电图、起搏信号，通过4G或WiFi无线上传心电图数据。产品小巧，支持多种自动分析软件，为医生的全面诊断提供帮助

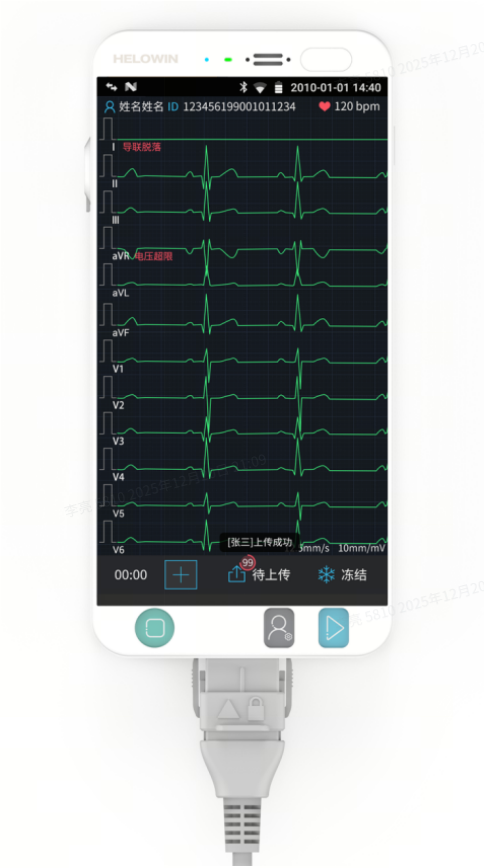

2、产品功能

- 2.1异步十八导静态心电图采集，最大支持16K采样率
- 2.2多导联选择：RA、LA、RL、LL、V1~V9、V3R、V4R、V5R
- 2.3支持起搏信号检测
- 2.4无线数据传输：蜂窝移动通信、WiFi无线数据传输模式
- 2.5支持心电图波形实时线传模式
- 2.6数据管理：支持数据存储、浏览功能

3、产品规格

3.1产品尺寸：162mm×78mm×16.4mm

3.2工作电源：外部电源：AC100-240V，50/60Hz；内部电源：DC3.5 V~4.35 V，标称3.8 V

3.3支持网络：4G蜂窝移动网络和 WiFi 网络

3.4屏幕尺寸：5.46英寸电容屏，16:9；显示分辨率：720*1280

3.5心电参数：

3.5.1导联选择：12导联，I，II，III，aVR，aVL，aVF，V1，V2，V3，V4，V5、V6，V7、V8、V9、V3R、V4R、V5R

3.5.2输入阻抗：在规定的频率范围内，除0.5-20Hz时，输入阻抗 $\geq 50\text{M}\Omega$ ；其余频率输入阻抗均不小于 $10\text{M}\Omega$ 。

3.5.3共模抑制比：不小于120 dB

3.5.4幅频特性：以10Hz为基准，0.01Hz~500Hz

3.5.5增益设置和准确度：20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV、2.5mm/mV，误差为 $\pm 5\%$

3.5.6起搏器脉冲显示能力：设备能对幅度为750uV~700mV、持续时间0.05ms~2.0ms、上升时间小于100us、频率为100/min的起搏脉冲出现时应有显示心电图信号的能力。对持续时间为0.05ms~2.0ms（幅度、上升时间和频率这些参数按上面规定的）的起搏脉冲在记录上应有可见的起搏脉冲指示；这个指示至少有0.2mV RTI 幅度的显示

3.6心率监测范围：10 bpm~300 bpm，最大允许误差 $\pm 2\text{ bpm}$ 或 $\pm 5\%$ ，取最大值；

3.7结构组成：主机、心电导联线、肢体电极夹、锂电池、TF卡、胸电极连球、电源适配器、Type c 线、4.0插针转扣式转接线（选配）、采集客户端软件、使用说明书、产品合格证

3.8内置锂电池容量：6600mAh

4、应用场景

4.1应用范围：各大型综合性医院、社区卫生服务中心、干休所、疗养院等医疗机构。

4.2应用场景：体检、门诊、病房，院外救护，病房巡诊、出诊等场景。

直传模式：固定场所，通过USB连接电脑或连接固定WiFi（电脑插WiFi热点，直传）地址上传数据，电脑采集端实时显示十二导心电图，根据检查单要求进行心电数据采集、上传。

移动模式：携带设备和配件到患者病床旁进行心电采集，并可通过4G或WiFi无线上传至平台进行分析。

5、产品优势

5.1支持异步十八导联采集和分析

5.2最大支持16K采样率，具备起搏钉检测

- 5.3强大的自动分析算法：支持常规十八导联心电自动分析、心电向量、起搏分析、心电晚电位等
- 5.4 4G全网通/WiFi无线通信，12导同屏显示，方便移动场景使用
- 5.5多种身份录入方式，支持扫描识别患者手环二维码、条码、身份证、医保卡
- 5.6支持边充边用，减少充电烦恼